



- WORKSHOP

IKT Forum Linz 07/2015

GoTalkNOW ... eine unglaublich vielseitige App


The screenshot displays the GoTalkNOW app interface with a grid of colorful icons for different functions. The icons are arranged as follows:

- Top row: Kommunikationsbuch (blue), Videos (yellow), Erzählbuch (purple), Mediaplayer (red).
- Second row: Kommunikationstafel (white), GoTalk NOW logo (orange), Ich-Buch (green).
- Third row: Präsentation (grey), Eierlegende Wollmilchsau (white sheep), Diagnostik mit Fred (blue).
- Fourth row: Quiz (green), Sprachaufnahme (orange), URL einfügen (pink), und bestimmt noch viel mehr... (white).

At the bottom, a dark green navigation bar contains icons for home, refresh, a person, a speech bubble, and play, with the text "Eierlegende Wollmilchsau" in the center.

als Talker

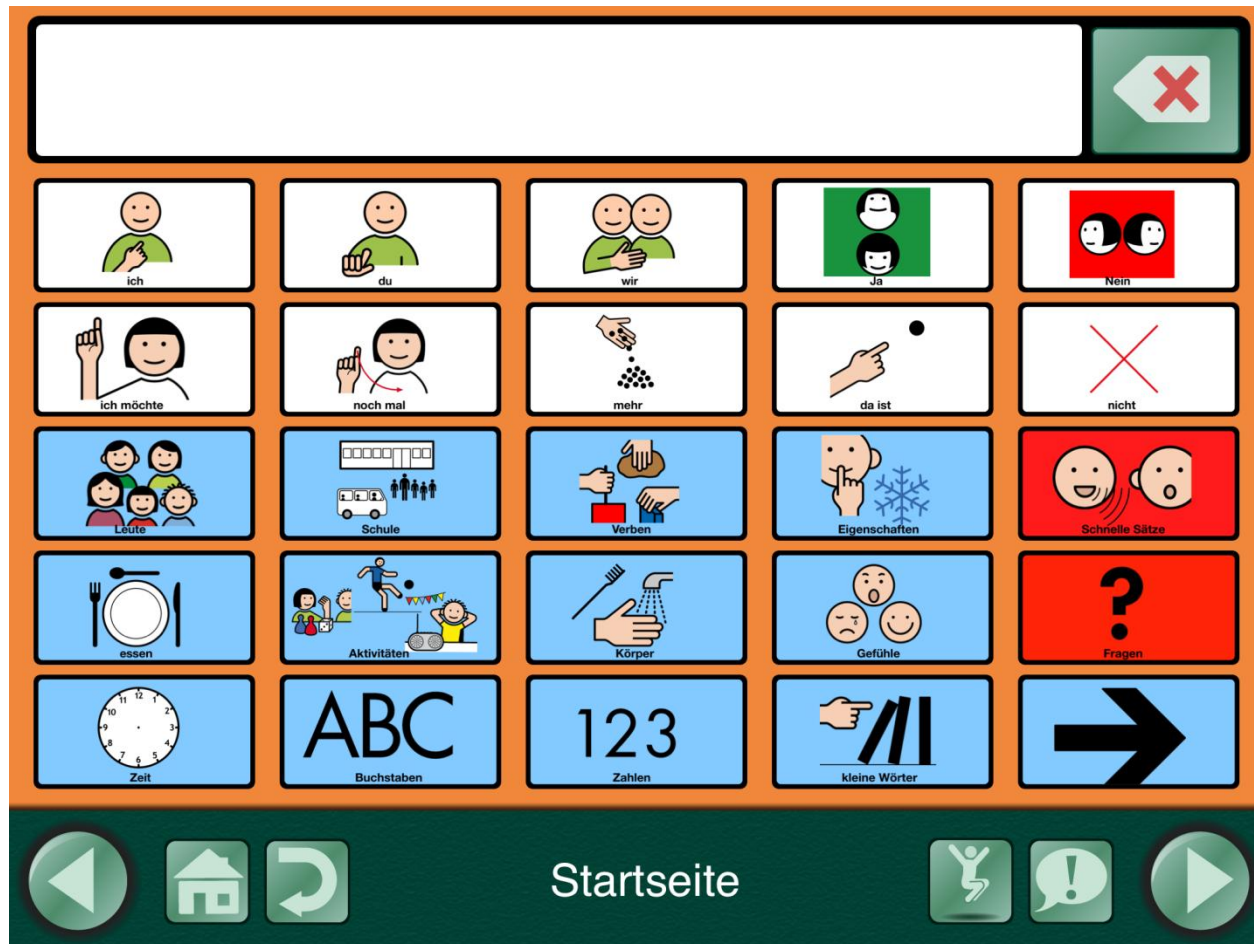Startseite mit Tasten für Kategorien, verlinkt mit Unterseiten.
Links sind blau markiert, sprechende Tasten weiß.
Alle Seiten als Expressleiste, damit Wörter kombiniert werden können.



als Kommunikationstafel

einzelne Seite mit sprechenden Tasten für eine bestimmte Situation.

The communication board is organized as follows:

- Top Row:** A large empty white box for writing, followed by a green button with a white arrow pointing left and a red 'X'.
- Second Row:**
 - Icon: A person pointing up. Label: Ich möchte
 - Icon: Two people, one holding a red card. Label: bitte
 - Icon: Two people, one holding a red card. Label: danke
 - Icon: Two people at a table with plates and cutlery. Label: Guten Appetit
- Third Row:**
 - Icon: A smiling face with a red tongue sticking out. Label: schmeckt lecker
 - Icon: An orange. Label: Mandarine
 - Icon: A glass of yellow liquid with a spoon dripping. Label: Senf
 - Icon: A sad face with a red tongue sticking out. Label: schmeckt nicht
- Fourth Row:**
 - Icon: A hand dropping black dots. Label: mehr
 - Icon: A slice of brown bread. Label: Nutellabrot
 - Icon: A pile of green olives. Label: Olive
 - Icon: Two hands clapping. Label: bin fertig
- Fifth Row:**
 - Icon: Two faces, one above the other. Label: Ja
 - Icon: A red radish and a white radish. Label: Radieschen
 - Icon: Five colorful gummy bears. Label: Gummibärchen
 - Icon: Two faces, one above the other, on a red background. Label: Nein
- Bottom Bar:** A dark green bar containing navigation icons: a left arrow, a house, a refresh arrow, a plate of food with a fork and knife, the text 'Ü Essen Meral', a person jumping, a speech bubble with an exclamation mark, and a right arrow.

als Videoplayer

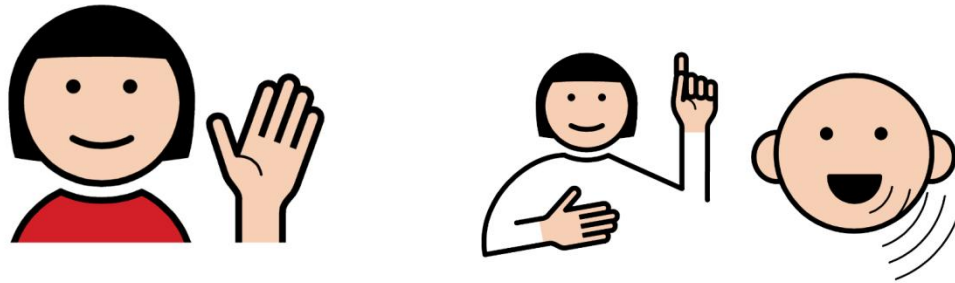
Jede Taste ist mit einem auf dem iPad
gespeicherten Video verknüpft.



Tipp: in den Einstellungen unter Videos „Alternative Ansicht“ wählen.

für Präsentationen

Jeweils nur 1 Taste pro Seite, jede Taste leitet automatisch auf die nächste Seite weiter.




Hallo! Ich möchte Ihnen etwas über mich erzählen!

Begrüßung

Tipp: gelber Button: „Nach Aktion ... gehe zur nächsten Seite!“

als Musik-Player

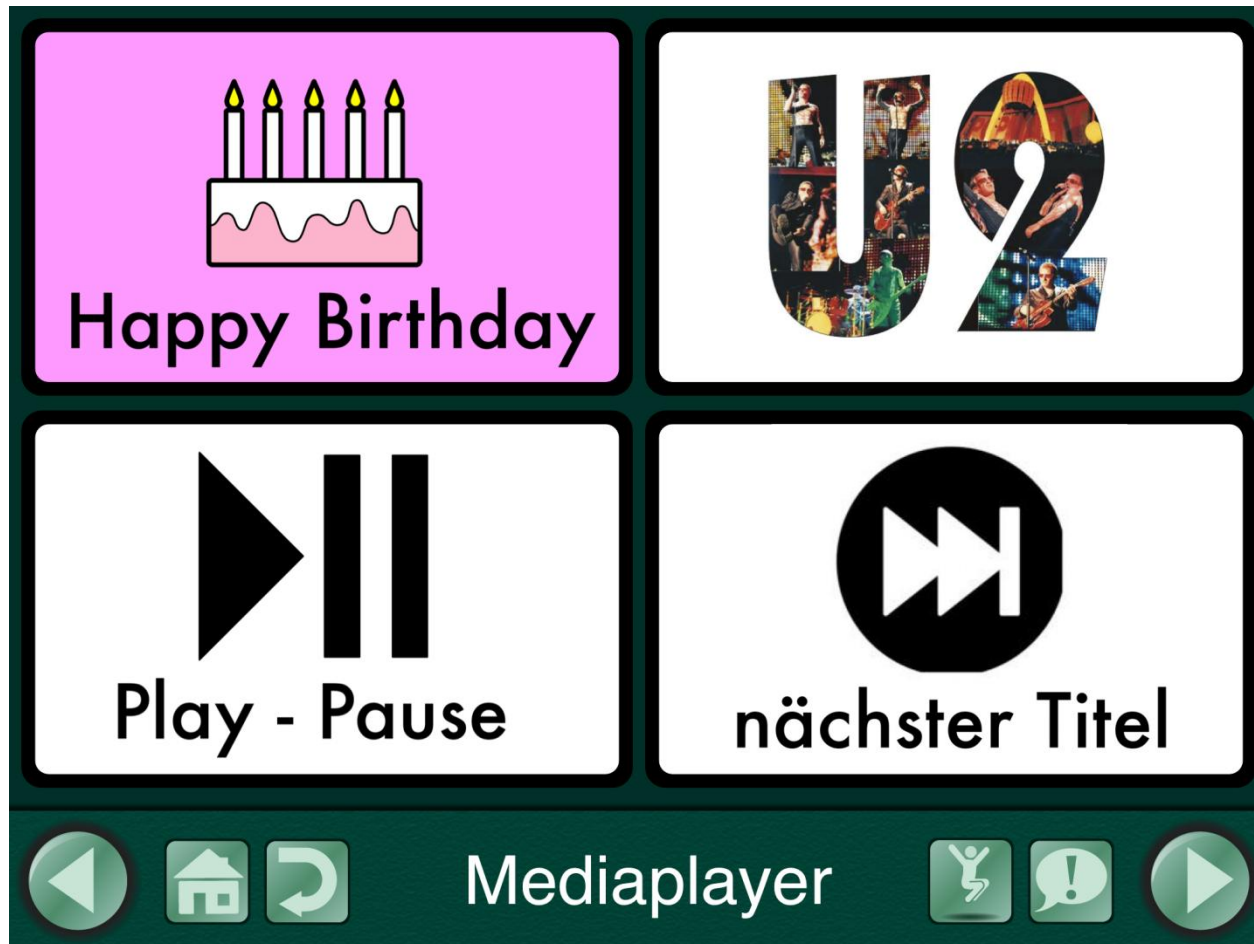die Tasten starten Lieder, die auf dem iPad in der iPad-Musik-App gespeichert sind. (z.B. mit iTunes übertragen wurden). Eine Taste kann einen Titel oder auch ein ganzes Album abspielen.



Tipp: Unbedingt auch die Funktionstaste „Play - Pause“ auf jeder Seite anlegen. Sonst kann man die Musik nicht mehr anhalten.

als Ich-Buch

Startseite verlinkt mit Unterseiten, dahinter zahlreiche Informationen, mit denen ich von mir erzählen kann. Kann auch Videos und Musik enthalten...
und natürlich jede Menge Fotos!

The grid consists of 11 icons arranged in three rows:

- Row 1: **über mich** (yellow background, person pointing up), **das mag ich (nicht)** (red background, thumbs up/down), **das habe ich schon alles erlebt** (pink background, person with hot air balloon).
- Row 2: **Menschen** (light green background, group of people), **Foto** (white background, text 'Foto'), **Schule/Arbeiten** (blue background, person at desk).
- Row 3: **Selbständigkeit** (orange background, person with hands), **Zukunftsträume** (purple background, person with document), **Kommunikationsbuch** (grey background, text 'Hier über gehe zu --> ändern --> andere Bücher das Kommunikationsbuch verlinken.' and a calendar icon).

Navigation bar at the bottom: back, home, refresh, **Start**, person, exclamation mark, play.

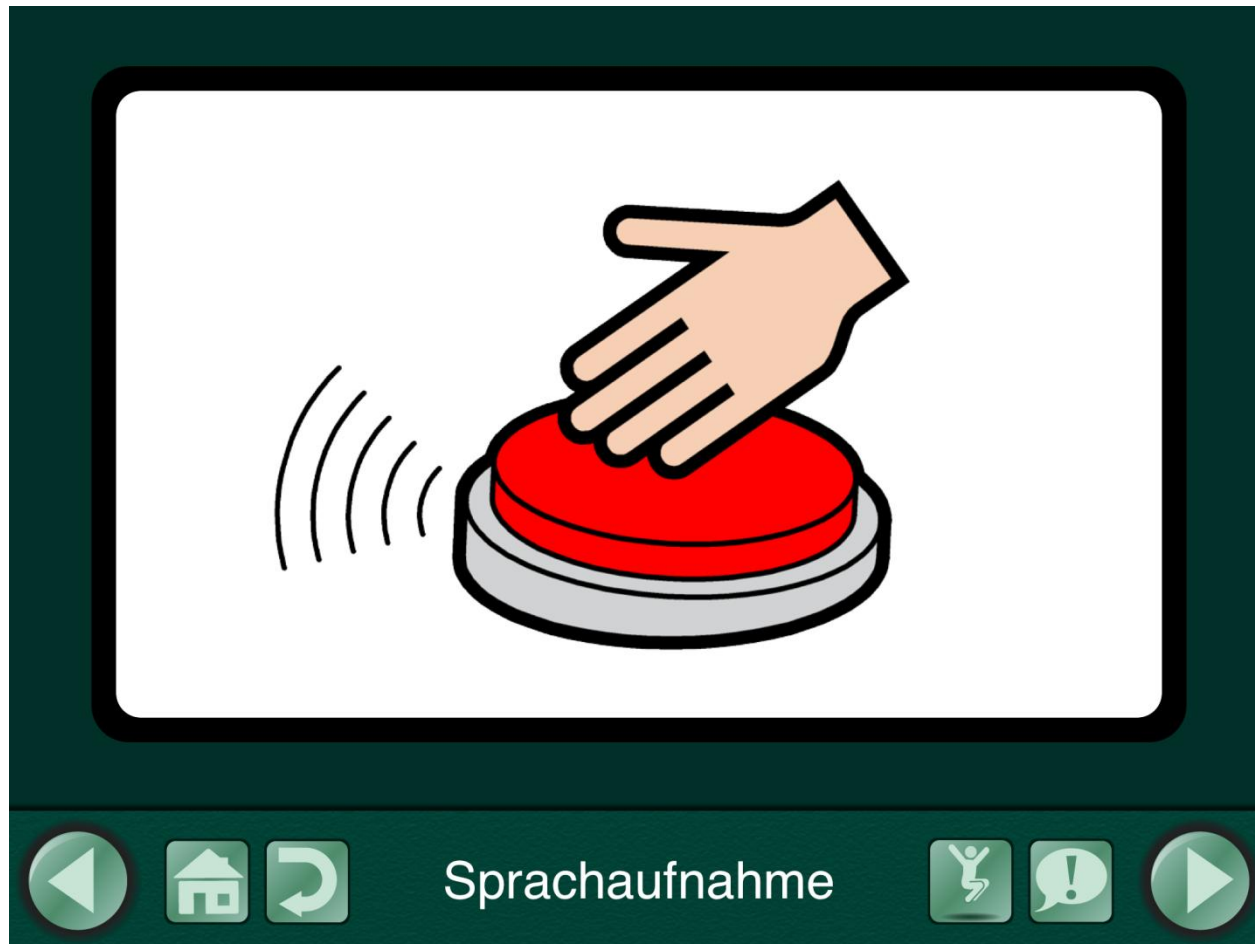
Tipp: Vorlage zum Ausfüllen kann runtergeladen werden:

www.die-uk-kiste.jimdo.de

Runterladen, in eigene Dropbox speichern, dann Import aus der Dropbox.


als BigMack

eine Taste mit Sprachaufnahme






als Erzählbuch

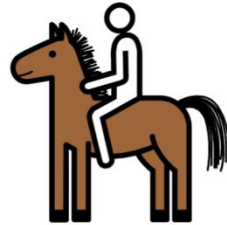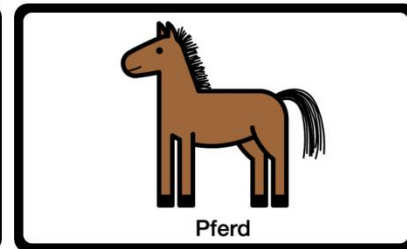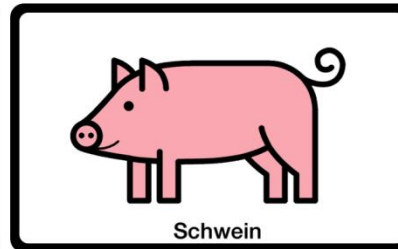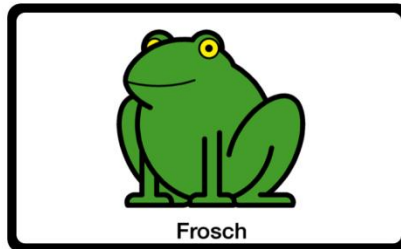eine Geschichte wird über mehrere Seiten erzählt, ein Satzanfang wird von einer Taste vorgelesen, der Nutzer entscheidet, wie es dann weitergeht, indem er aus verschiedenen Möglichkeiten auswählt.


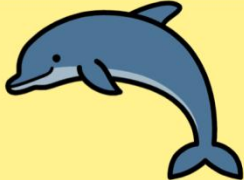


Er ritt auf seinem



als Quiz

Die mittlere Taste stellt die Frage, nur die richtige Antwort ist verlinkt mit einem „Richtig, die Ente kann fliegen“.
Alle anderen Antworten machen keine Aktion.

		
	Welches Tier kann fliegen?	
		

Navigation icons: back, home, refresh, play, warning, forward.

Neue Seite 1

als Link ins Web

Taste ist verlinkt mit einer Website.
Es öffnet sich die Safari-App und lädt die Seite.
(Leider ist man dann in Safari und kommt nicht so einfach wieder zurück..)





Gut zu wissen

- kostet 79,99
- Symbolsammlungen und Stimmen müssen als in-App gekauft werden
- in verschiedenen Sprachen nutzbar: es gibt viele Stimmen, das iPad schreibt auch verschiedene Schriften
- Die Settings werden in der Sprache angezeigt, auf die das iPad eingestellt ist
- es gibt eine Testversion zum Ausprobieren (man kann damit 3 Seiten gestalten)

iTunes Vorschau

Überblick Musik Video Charts

GoTalk Now

von Attainment Company

[View More by This Developer](#)

Öffnen Sie iTunes, um Apps zu kaufen und zu laden.



[In iTunes ansehen](#)

79,99 €

Kategorie: Bildung

Aktualisiert: 28.06.2015

Version: 4.9.3

Größe: 76.8 MB

Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Türkisch

Entwickler: Attainment Company, Inc.

© 2011 Attainment Company

Kennzeichnung: 4+

Kompatibilität: Erfordert iOS 6.0 oder neuer. Kompatibel mit iPad.

Kundenbewertungen

Wir haben noch nicht genügend Bewertungen erhalten, um einen

Beschreibung

Seit 25 Jahren entwickelt Attainment bereits Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation. Bekannt geworden ist Attainment auf dem deutschen Markt vor allem durch die GoTalks, die seit Jahren bewährte und robuste Kommunikationsgeräte sind. Die langjährige Erfahrung von Attainment ist nun in die Entwicklung von GoTalk NOW

[GoTalk Now Support](#)

[...Mehr](#)

Neue Funktionen von Version 4.9.3

Tactile Talk In-App Purchase

Bug Fixes

iPad Screenshots



Das Hauptmenü



Der Seiteneditor

GoTalk Now Seiteneditor

Inhaltsverzeichnis:
Seiten löschen, verschieben,
neue einfügen.

Die vier Kernvokabular-Tasten bearbeiten.

Öffnet eine neue Taste.
Zum Hinzufügen klicken

Zurück zum Hauptmenü

Neue Seite 94

Seitenname bearbeiten, Icon einfügen, ...

Neue Seite einfügen, nur auf letzter Seite im Buch zu sehen. Sonst über + Button im Inhaltsverzeichnis!

The screenshot shows the GoTalk Now page editor interface. At the top left, a 'Buttontext' panel is shown with a red arrow pointing to a 'Zum Hinzufügen klicken' button on the main editor screen. Below this, a 'Seitenoptionen' panel is visible. In the center, an 'Inhaltsverzeichnis' (Table of Contents) panel lists various page categories like 'Fragen', 'Feste', 'Religion', etc. To the right, a 'Kernvokabular' panel displays four icons: 'ich möchte', 'mehr', 'nicht', and 'da ist'. Below this is a 'Vorlagengalerie' (Template Gallery) panel. At the bottom, a navigation bar contains several icons: a back arrow, a home icon, a settings icon, a page icon labeled 'Neue Seite 94', a speech bubble icon, and a plus sign icon. Red arrows point from these icons to their respective descriptions. A keyboard is shown at the bottom, with an arrow pointing to the 'Neue Seite 94' text field.

Der Tasteneditor

GoTalk Now
Tasteneditor

The image displays the GoTalk Now Tasteneditor interface. At the center is a large white button with the text "Buttontext" in bold black font. Surrounding this central button are several toolbars and panels:

- Top Bar:** Contains navigation and utility icons: "Aufgaben", "synthetisierte Sprache", "Gehe zu Seite", "Metasprayer", "URL", "Steuerung der Flow Leisten", and "Video". Below this, there are three buttons: "Stimme", "Vorwärts", and "Nach Aktion:Keine".
- Left Panel:** A color palette with two tabs: "Standardfarben" and "Benutzerdefiniert". It shows a grid of color swatches.
- Bottom Bar:** Contains buttons for "Hintergrund", "Rahmen", "A Buttontext", "Bild hinzufügen", and "Fertig".
- Right Panel:** A panel titled "Nach Aktionen:" with a list of actions: "Nichts" (checked), "Gehe zur nächsten Seite", "Gehe zurück (Zurückstufen)", and "Gehe zu bestimmter Seite".
- Bottom Center Panels:** Two smaller panels are shown below the main editor. The left one is titled "Buttontext" and has fields for "Text" (set to "Buttontext"), "Größe", "Schriftart" (set to "HelveticaNowUI-Bold"), "Farbe", and "Schatten". The right one is titled "Bild hinzufügen" and lists sources: "GoTalk Image Library", "Metacom", "Download GoTalk Symbolsammlung", "Suche im Internet", "Foto machen", and "Aus Fotoalbum".

Red arrows point from the central button to the various toolbars and panels, indicating their relationship to the editing process.

Die Einstellungen

Hier kann man den Homebutton im Nutzermodus entfernen. Achtung: Verlassen des Nutzermodus dann nur über Wischen mit drei Fingern von oben!

Hier kann man das Inhaltsverzeichnis deaktivieren.

Das Blättern zur Nächsten Seite durch Wischen kann hier deaktiviert werden.

Im Hintergrund laufende Musik wird automatisch gestoppt, wenn GoTalkNow gestartet wird.

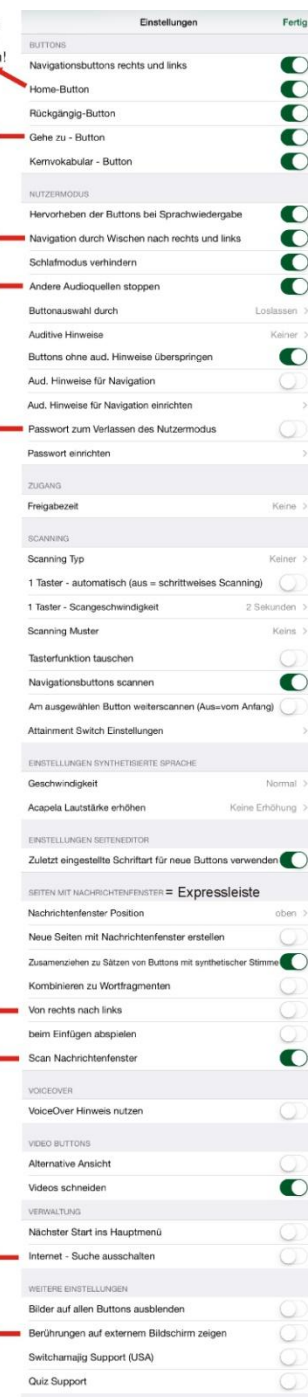
Zum Editier-Modus kann nur durch Passwort-Eingabe gewechselt werden. Achtung: App kann über Home-Button trotzdem geschlossen werden (s. Geführter Zugriff)

Macht bei der deutschen Lesrichtung von links nach rechts keinen Sinn, das umzustellen!!!

Wir die Expressleiste angeklippt, markiert ein Rahmen das Wort, das gerade gesprochen wird.

Ist das aktiviert, bietet der Button "Bild hinzufügen" keine Suche im Internet an.

Wichtig für Präsentationen: angeklippte Tasten werden markiert.



Hier kann man die Pfeiltasten zum Blättern im Nutzermodus entfernen.

Hier kann man den Button ausschalten, mit dem man auf die jeweils vorherige Seite kommt.

Entfernt den Kernvokabular-Button.

Buttons werden umrahmt, wenn sie angeklickt werden. Kann hier deaktiviert werden.

Ist die GoTalk Now geöffnet, schaltet das iPad nicht die Screen-Sperre ein.

alternativ: durch berühren
Auditive Hinweise können bei den einzelnen Buttons hinterlegt sein. Hier kann gewählt werden, ob diese gegeben werden, und in welcher Lautstärke.
Wichtig bei Scanning.

Hier kann eingestellt werden, wie lange eine Taste berührt werden muss, um sie auszulösen.

Alternativ: Sehr langsam, langsamer, langsam, schnell, schneller, sehr schnell

Hier kann die Sprachausgabe noch mal verstärkt werden.

alternativ: unten

alle neuen Seiten haben automatisch eine Expressleiste, wenn das aktiviert ist.

Tasten mit einzelnen Buchstaben werden zu Wörtern synthetisiert, wenn das aktiviert ist.

Buttons werden erst als ganzer Satz gesprochen, wenn die Expressleiste angeklippt wird, wenn das Feld deaktiviert ist.

Sehr gut: Videos haben einen gut sichtbaren Pause- und Exit-Knopf, wenn das aktiviert ist.

der Start-Punkt im Video kann bestimmt werden, wenn das aktiviert ist.

Beim Schließen der App mit dem Homebutton und beim Wiederöffnen wird immer das Hauptmenü angezeigt, wenn das aktiviert ist.

Es werden alle Bilder und Symbole auf allen Tasten ausgeblendet, wenn das aktiviert ist.

Im Seiteneditor erscheint die Option "Quizseite", die für jede Seite extra aktiviert werden kann. Dadurch wird die Anordnung der Buttons bei jedem Aufruf der Seite nach dem Zufallsprinzip verändert.